



Schnellstartanleitung

Zur Verwendung mit DryCaddy UV



EAR TECHNOLOGY CORPORATION

Helping people hear better, every day.


1 Einlegen der Batterien



Ein DryCaddy Disc-Trockenmittel und zwei AAA-Batterien sind in der kleinen Innerverpackung verpackt. Entfernen Sie den Inhalt.



Entfernen Sie den Deckel / die Batterieabdeckung, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.

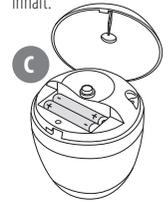


Legen Sie die Batterien mit der richtigen Polarität ein.




Bringen Sie den Deckel wieder an der Trocknungseinheit an, indem Sie die Laschen am Deckel mit den Kerben an der Einheit ausrichten. Zum Schließen im Uhrzeigersinn drehen.


2 Trockenmittel installieren

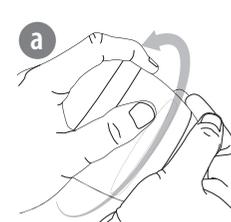

Entfernen Sie das Boden- / Trockenmittelfach, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.

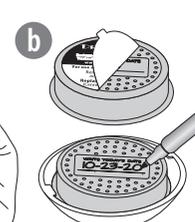


Entfernen Sie die Folie vom DryCaddy Disc-Trockenmittel. In das Trockenmittelfach legen, die Löcher nach oben. Schreiben Sie das heutige Datum auf das Trockenmittel, um daran zu erinnern, dass es in einem Monat ersetzt werden muss.

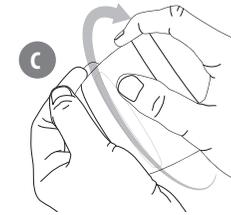


Befestigen Sie die Basis wieder an der Trocknungseinheit, indem Sie die Laschen an der Basis mit den Kerben an der Einheit ausrichten. Zum Schließen im Uhrzeigersinn drehen.


3 Hörgeräte hinzufügen

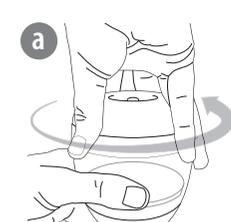

Entfernen Sie den Deckel und die Batterieabdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

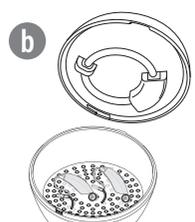

Fügen Sie der gespiegelten Oberfläche Hörgeräte hinzu. Öffnen Sie unbedingt die Batterieabdeckung. Sie können die Batterien im Inneren lassen.

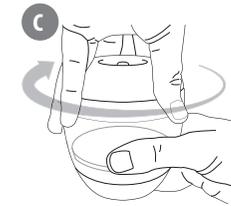

Bringen Sie den Deckel wieder an der Trocknungseinheit an, indem Sie die Laschen am Deckel mit den Kerben an der Einheit ausrichten. Zum Schließen im Uhrzeigersinn drehen.

Was ist inbegriffen



HAUPTKOMPONENTEN DES TROCKNERS

Deckel / Batterieabdeckung

Batteriefach mit UV-C-Lampe


Trockenraum

Boden- / Trockenmittelfach

4 Aktivieren des UV-C-Zyklus




Halten Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los.

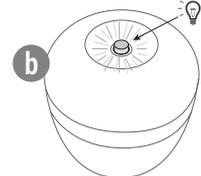

Rotes Licht blinkt.




Drücken Sie die Taste erneut und lassen Sie sie wieder los. Dies startet die UV-C-Funktion.

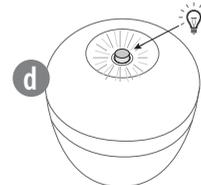

Das Licht pulsiert langsam für ungefähr 3-1/2 Minuten dann automatisch abschalten. Die UV-C-Funktion ist abgeschlossen.

Bei Nichtgebrauch sollten Ihre Geräte bei geschlossenem Deckel im DryCaddy UV-Gerät aufbewahrt werden. Das Trockenmittel entfernt weiterhin Feuchtigkeit von den Geräten.

Manuelles Beenden des Zyklus

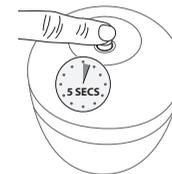

Während sich die UV-C-Lampe in 3-1/2 Minuten automatisch ausschaltet, möchten Sie den Zyklus möglicherweise stoppen, bevor er abgeschlossen ist. Halten Sie dazu einfach die LED-Betriebsanzeige 5 Sekunden lang gedrückt. Das rote Licht erlischt und zeigt an, dass der Zyklus gestoppt wurde.



Habe Fragen? Benötigen Sie technische Unterstützung? Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine E-Mail, um Unterstützung zu erhalten.

+31407602111 | info@dryandstore.com

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von Produkten, die mit Batterien betrieben werden, insbesondere wenn Kinder anwesend sind, sollten stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, einschließlich:

GEFAHR – Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Nicht beim Baden verwenden.
- Stellen Sie das Produkt nicht dort auf, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden kann.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen oder fallen lassen.
- Greifen Sie nicht nach diesem Gerät, wenn es ins Wasser gefallen ist.

WARNUNG – Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen von Personen zu verringern:

- **Öffnen Sie das Trockenfach NIEMALS, während das UV-Licht eingeschaltet ist. Das Betrachten des UV-Lichts mit bloßem Auge kann zu schweren Verbrennungen des Auges führen.**
- Überwachen Sie die Verwendung durch, an oder in der Nähe von Kindern oder Invaliden genau.
- Batterien sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Verwendungszweck.
- Betreiben Sie dieses Produkt niemals, wenn es nicht richtig funktioniert, heruntergefallen oder beschädigt ist oder wenn die Batterien korrodiert sind. Senden Sie es zur Prüfung und Reparatur an die Verkaufsstelle oder das Servicecenter zurück.
- Lagern Sie Batterien niemals in einem losen Behälter, in dem sie andere Gegenstände berühren können.
- Stellen Sie das Produkt niemals auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett. Halten Sie alle Luftöffnungen frei von Flusen, Haaren und dergleichen.

HINWEIS: Dieses Produkt dient nicht zur Diagnose, Vorbeugung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten.

BETRIEBSBEDINGUNGEN Die Betriebstemperatur dieses Geräts beträgt ungefähr Umgebungstemperatur.



+31407602111 | drycaddyuv.com

©ETC DC UV QSG (GER) 1020 Rev A